










**Oral-B®**

Kids' Power Toothbrush



Type 3757

powered  
by **BRAUN**

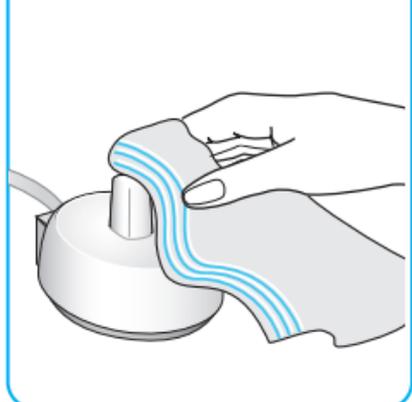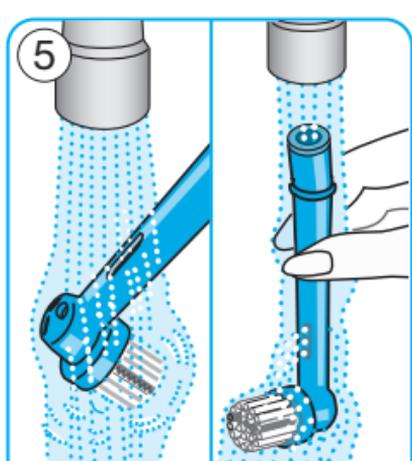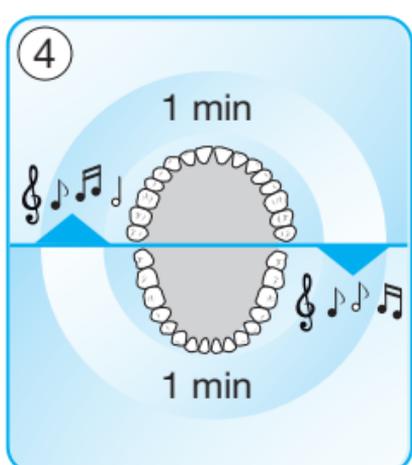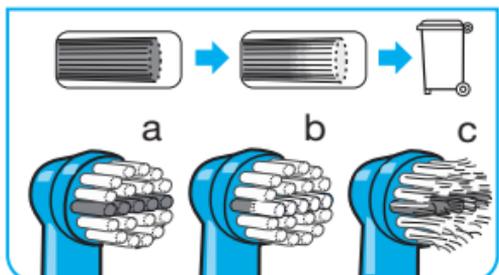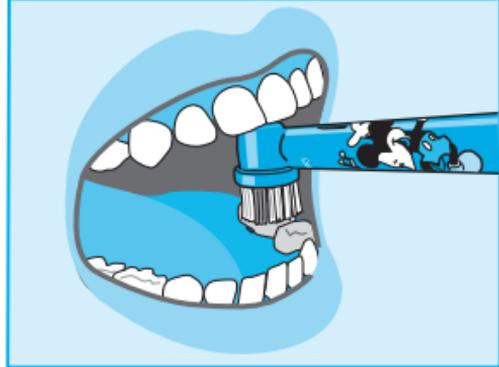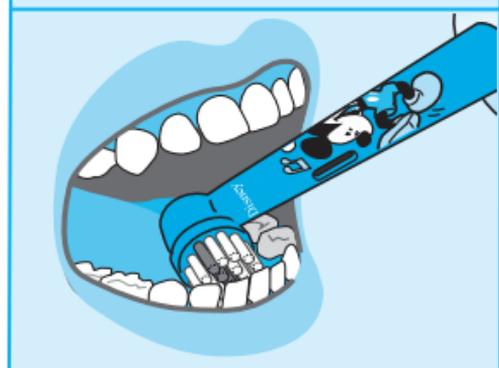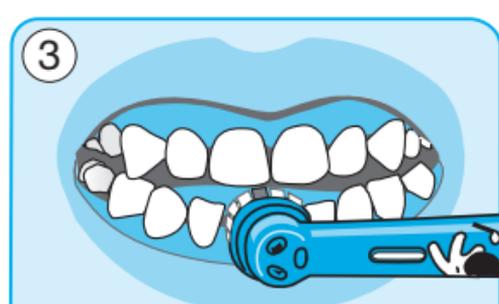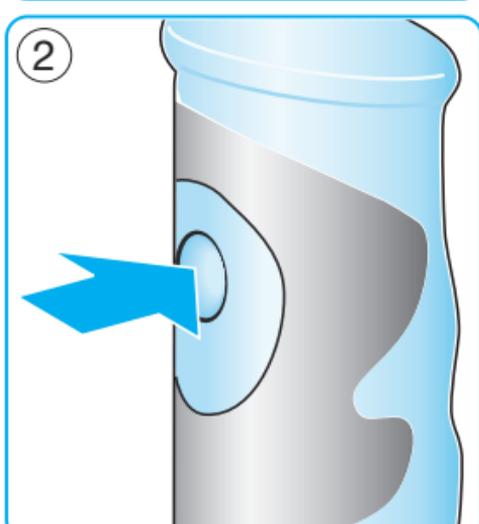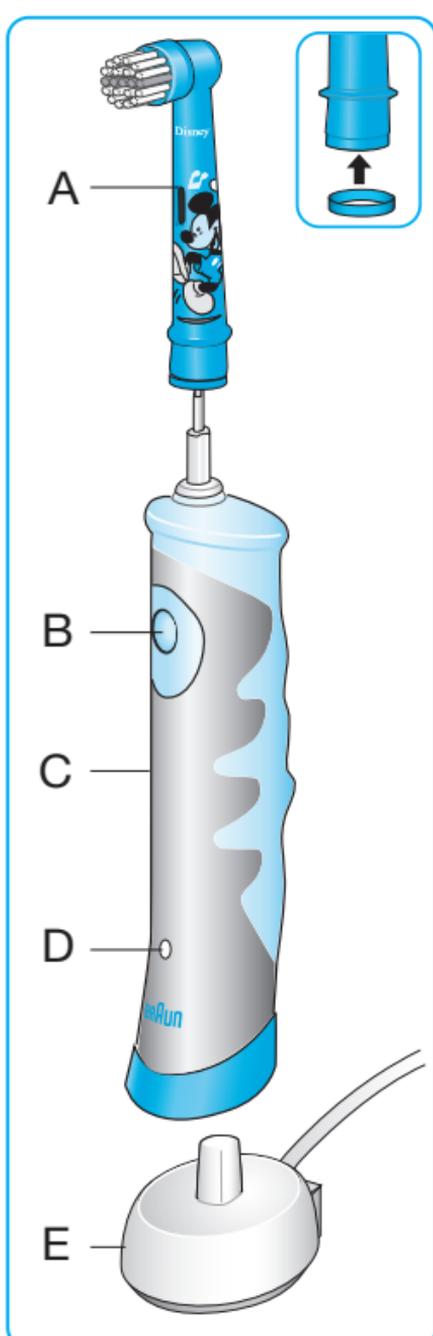

*Уважаемые родители!*

*Oral-B совместно с ведущими стоматологами и педиатрами разработала серию детских электрических зубных щеток для эффективной чистки детских зубов. Теперь Вашему ребенку будет легко овладеть правильными навыками чистки зубов. Мы надеемся, что Вашему ребенку понравится новый продукт Oral-B.*

*Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию о том, как пользоваться этой щеткой, перед тем, как показать ребенку. На начальном этапе дети должны пользоваться электрической зубной щеткой под присмотром взрослых.*

### **ВАЖНО**

- Периодически проверяйте шнур электропитания на наличие повреждений. В случае наличия повреждений, отнесите зарядное устройство в сервисный центр Oral-B Braun. Не используйте поврежденное или неработающее устройство. Это может привести к возгоранию, поражению электрическим током и иным повреждениям.
- Данный продукт не предназначен для детей до 3 лет. Дети от 3 до 14 лет и лица с ограниченными физическими или умственными способностями или с недостаточным опытом могут использовать зубную щетку под контролем лиц, отвечающих за их общую безопасность, либо после инструктирования по вопросам использования и мерам безопасности.
- Чистка и уход за устройством не должны проводиться детьми.
- Не игрушка!
- Используйте данное устройство только по назначению, как описано в данном руководстве. Не используйте запасные или дополнительные детали, не рекомендованные изготовителем.

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

- Если устройство уронили, насадка должна быть заменена перед следующим использованием, даже если нет видимых повреждений.
- Не погружайте устройство в воду или иную жидкость. Не рекомендуется размещать или хранить устройство в местах, откуда устройство может упасть в раковину или ванну с водой. Не пытайтесь достать упавшее в воду устройство. Немедленно отключите его от электропитания.
- Не разбирайте данное устройство самостоятельно, за исключением случаев замены аккумулятора. При замене аккумулятора, действуйте осторожно, стараясь не замкнуть положительный (+) и отрицательные (-) контакты.
- Во время отключения устройства от электропитания, всегда держитесь за штекер, а не за сам шнур. Не дотрагивайтесь до штекера шнура электропитания влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током.
- В случае если Вы проходите стоматологическое лечение, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом-стоматологом перед началом использования.
- Эта зубная щетка – устройство для персонального ухода, не предназначенное для использования на нескольких пациентах в стоматологических клиниках или институтах.

### **Описание и комплектность**

- A Сменная насадка
- B Кнопка включения/выключения
- C Ручка
- D Индикатор заряда
- E Зарядное устройство

### **Спецификация:**

Спецификацию электропитания см. также на дне зарядного устройства.

Тип: 3757

Уровень шума: ≤65 дБ (А)

### **Подсоединение и зарядка**

Ручка вашей зубной щетки водонепроницаема, электрически безопасна и создана специально для использования в ванной комнате.

- Включите зарядное устройство (E) в электрическую розетку и поставьте рукоятку (C) на зарядное устройство.
- Красный индикатор зарядки (D) мигает, пока ручка заряжается. Когда ручка будет полностью заряжена, индикатор заряда погаснет (1). Полная зарядка аккумулятора занимает до 22 часов и обеспечивает до 7 дней регулярной чистки зубов (два раза в день, по 2 минуты).  
Примечание: После полной разрядки индикатор может начать мигать не сразу, это может занять 10–15 минут.
- При ежедневном использовании щетки вы можете хранить рукоятку на зарядном устройстве, чтобы поддерживать полный уровень заряда щетки. Перезарядка аккумулятора невозможна.

Для того чтобы поддерживать максимальную емкость аккумуляторной батареи, не реже 1 раза в 6 месяцев отключайте зарядное устройство от сети и используйте щетку регулярно до ее полной разрядки.

## Музыкальный таймер.

Следующие шаги помогут Вам объяснить и показать ребенку, как правильно пользоваться электрической зубной щеткой:

- При снятии щетки с зарядного устройства прозвучит короткая мелодия.
- Нанесите небольшое количество зубной пасты на головку зубной щетки (мы рекомендуем использовать детскую зубную пасту).
- Сначала поднесите щетку к зубам и только потом включите, нажав на кнопку включения/выключения (В) (2).
- Начинайте чистку с нижних зубов: медленно перемещайте щетку от одного зуба к другому, задерживаясь на поверхности каждого зуба несколько секунд;
  - сначала внешние поверхности,
  - затем внутренние поверхности,
  - и, наконец, жевательные поверхности (3).Не нажимайте на щетку слишком сильно и не пытайтесь тереть. Детская электрическая зубная щетка Braun Oral-B обеспечивает правильную технику чистки зубов.
- Короткая мелодия прервет движения щетки через 1 минуту чистки. Это означает, что Ваш ребенок должен перейти к чистке верхних зубов. Чистите их – опять зуб за зубом – пока не заиграет мелодия (через 1 минуту чистки). Таким образом, Вы можете быть уверены, что Ваш ребенок чистит зубы минимум 2 минуты (оптимальное время чистки, рекомендуемое стоматологами) (4).
- Выключите щетку, нажав кнопку включения/выключения (В) пока щетка еще находится во рту.

Стоматологи рекомендуют менять насадку зубной щетки каждые 3 месяца. Насадки оснащены голубыми щетинками INDICATOR® (3a). При ежедневной тщательной чистке зубов дважды в день по 2 минуты, голубые щетинки постепенно обесцветятся в течение 3 месяцев (3b), при условии, что используется зубная паста. Если щетинки изнашиваются до того, как потеряют цвет, значит, Ваш ребенок слишком сильно давит на щетку при чистке (3c).

Замена насадок для детских электрических щеток: EB10 Имеются в продаже в вашем магазине или в сервисных центрах Oral-B Braun.

## Чистка изделия

После использования головку щетки следует промыть под струей воды при включенной рукоятке в течение нескольких секунд. Выключите щетку и снимите насадку. Промойте все части отдельно под струей воды, затем вытрите их насухо перед тем, как вы снова соберете щетку. Отсоедините зарядное устройство от щетки перед чисткой. Рукоятку щетки можно мыть в посудомоечной машине. Ни в коем случае не помещайте зарядное устройство в посудомоечную машину или в воду. Зарядное устройство следует периодически вытирать влажной тканью (5).

В изделие могут быть внесены изменения без уведомления.

Использованное устройство не должно выбрасываться с общими отходами или мусором. Пожалуйста, утилизируйте их через центр обслуживания Braun или через соответствующий специализированный пункт сбора (при наличии в вашем регионе).



## Гарантия

На данное изделие распространяется гарантия в течение 2 лет с момента покупки.

В течение гарантийного периода мы бесплатно устраним путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материала или сборки.

В случае невозможности ремонта в гарантийный период, изделие может быть заменено на новое или аналогичное в соответствии с Законом о защите прав потребителей. Гарантия обретает силу только, если дата покупки подтверждается печатью и подписью дилера (магазина) на последней странице оригинальной инструкции по эксплуатации Braun, которая является гарантийным талоном. Данные гарантийные обязательства действуют во всех странах, где изделие распространяется самой компанией Braun или ее компанией-дистрибьютором, и где никакие ограничения по импорту или другие правовые положения не препятствуют предоставлению гарантийного обслуживания. Осуществление гарантийного обслуживания не влияет на дату истечения срока гарантии. Гарантия на замененные части истекает в момент истечения гарантии на данное изделие.

Данная гарантия не распространяется на случаи повреждения или поломки изделия в результате неправильного использования (см. список ниже), естественного износа, особенно в отношении насадок для рукоятки щетки, а также дефектов изделия не имеющих эффекта для функционирования данного устройства. Гарантия не является действительной в случае ремонта изделия не авторизованными сервисными службами и в случае неиспользования оригинальных запасных частей Braun.

Для осуществления гарантийного обслуживания, передайте данное изделие в авторизованный сервисный центр Oral-B Braun вместе с чеком, подтверждающим покупку изделия.

Все другие требования, включая требования возмещения убытков, исключаются, если наша ответственность не установлена в законном порядке.

Рекламации, связанные с коммерческим контрактом с продавцом, не попадают под эту гарантию.

Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- дефекты, вызванные форс-мажорными обстоятельствами;
- использование в профессиональных целях;
- нарушение требований инструкции по эксплуатации;
- неправильная установка напряжения питающей сети (если это требуется);
- внесение технических изменений;
- механические повреждения;
- повреждения по вине животных, грызунов и насекомых (в том числе случаи нахождения грызунов и насекомых внутри приборов);
- для приборов, работающих от батареек, – работа с неподходящими или истощенными батарейками, любые повреждения, вызванные истощенными или текущими батарейками (советуем пользоваться только предохраненными от протекания батарейками).

Внимание! Оригинальный Гарантийный Талон подлежит изъятию при обращении в сервисный центр для гарантийного ремонта. После проведения ремонта Гарантийным Талоном будет являться заполненный оригинал Листа выполнения ремонта со штампом сервисного центра и подписанный потребителем по получении изделия из ремонта. Требуйте проставления даты возврата из ремонта, срок гарантии продлевается на время нахождения изделия в сервисном центре.

В случае возникновения сложностей с выполнением гарантийного или послегарантийного обслуживания просьба сообщать об этом в Информационную Службу Сервиса Oral-B Braun по телефону 8-800-200-20-20

Данная гарантия не влияет на Ваши права, установленные законом.



Электрическая зубная щётка тип 4733 с сетевым блоком питания тип 3757, 220–240 Вольт, 50–60 Герц, 0,9 Ватт.

Товар сертифицирован  
Сделано в Германии, Браун ГмбХ  
Braun GmbH Werk Marktheidenfeld,  
Baumhofstr. 40,  
97828 Marktheidenfeld, Germany

Гарантийный срок/Срок службы 2 года.

