

MEGA TEN kids sonic



MEGA TEN kids sonic

www.megatensonic.ru
info@megatensonic.ru

MEGA TEN kids sonic

Зубная щетка Kids Sonic с LED - подсветкой

Руководство пользователя

Перед использованием необходимо ознакомиться с данной инструкцией!



Первая в мире звуковая зубная щетка с круговой насадкой на 360 градусов очищает зубы и десны там, где обычная зубная щетка не справляется. А с LED - подсветкой чистить зубы будет веселее.

Мамам LED - подсветка поможет проверить, хорошо ли почищены зубки.

Правила пользования

Включите щетку после нанесения зубной пасты. После использования промойте ее и высушите.

Помните, что зубная щетка — не игрушка! Не позволяйте ребенку играть со щеткой, особенно когда она находится в ротовой полости.

Чистка и хранения

Струей теплой воды удалите остатки зубной пасты между щетинками. Удалите остатки пасты можно другой насадкой, межзубным ершиком или зубочисткой.

Если щетинки загнулись или затвердели — замените насадку. Не позволяйте ребенку кусать и жевать насадку, тогда она прослужит около трех месяцев. Замените насадку при износе соединительной детали.

Общие меры предосторожности

- Если Вы не планируете использовать щетку в течение длительного времени, извлеките батарейку.
- Во избежание повреждения кнопок не нажимайте на них ногтями.
- Не меняйте батарейки влажными руками.
- Следует избегать ударов щетки о твердые поверхности.
- Не оставляйте изделие во включенном состоянии.
- Не следует использовать зубную щетку во время прохождения лечения ротовой полости.
- Используйте и храните изделие при температуре от 0 до 50 °С.
- Не нагревайте щетку и не кладите ее в кипящую воду, микроволновую печь, дезинфицирующее средство и т. п. Это может вызвать ее повреждение или деформацию.

Гарантия и обслуживание

Для получения подробной информации по данным вопросам обращайтесь к производителю: info@megaten sonic.ru


- Гарантийный срок: 1 год с момента приобретения. Данная гарантия не распространяется на насадки.
- Не являются гарантийными случаями:
 - Повреждения, возникшие в результате ненадлежащего использования или использования без соблюдения общих мер предосторожности
 - Естественный износ, включая царапины, трещины, обесцвечивание, выцветание
- Мы также не несем ответственности за проблемы, вызванные использованием щетки с другими, не рекомендованными нами изделиями.

Спецификация

Рекомендуемый возраст	Самостоятельно от 3 лет (так как щетка аккумуляторная и на батарейках - выключается с первого зубика и до 3х лет не можно использовать под присмотром взрослых)
Частота вибрации насадки	Приблизительно 16000 движений/мин
Материал	Головка - ПЭТ, корпус - ABS
Насадка	DuPont Тунгст
Термостойкость	Головка -40 °С, насадка -80 °С

Гигиеничный дизайн насадки с шайбами между кольцами щетинок

Запатентованная конструкция с шайбами между кольцами щетинок создаст пространство между щетинками, что помогает поддерживать чистоту насадки.

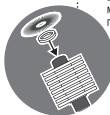

<Установка крышки аккумуляторного отсека>

(1) Установите крышку аккумуляторного отсека, как показано на рисунке выше

(2) Чтобы закрыть крышку, поверните ее по часовой стрелке на 90 градусов

<Назад>

«ВНИМАНИЕ!» Если крышка аккумуляторного отсека закрыта правильно, логотип MEGA TEN окажется сверху.

