


ИНСТРУКЦИЯ REVYLINE RL 025 PUPPY

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ЗВУКОВАЯ
ЗУБНАЯ ЩЕТКА

1-5
ЛЕТ

Поздравляем!

Вы стали обладателем высокотехнологичного устройства, которое позволит детским зубам и деснам быть красивыми и здоровыми. Ежедневное использование зубной щетки значительно снижает риск стоматологических заболеваний. Безопасна для тонкой зубной эмали молочных зубов. Рекомендуется для детей в возрасте 1-5 лет.

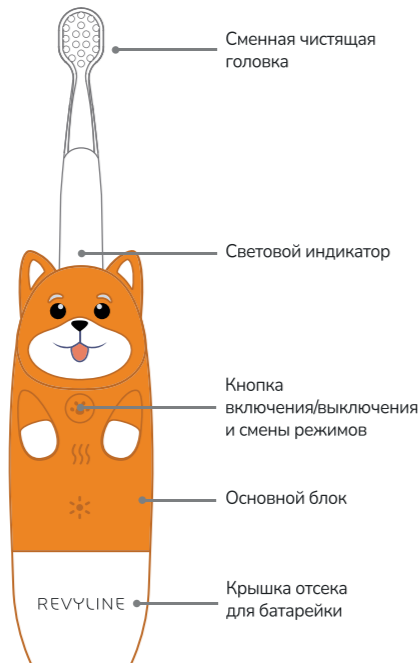

Меры предосторожности

Перед первым использованием щетки Revyline RL 025 Puppy внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните ее.

- Используйте только фирменные насадки и аксессуары.
- Если щетка не используется длительное время, рекомендуется вынуть батарейку, положить щетку в коробку и хранить в прохладном месте.
- Не вставляйте посторонние предметы в гнездо для сменной насадки.
- Запрещено оставлять прибор работающим в течение длительного времени. Время непрерывной работы не должно составлять более 10 минут.
- Не используйте прибор при наличии ранок в полости рта или на языке.
- Использование щетки детьми возможно только под присмотром взрослых.
- Запрещается бегать или ходить во время чистки зубов, когда щетка находится во рту.
- Электрическую зубную щетку Revyline RL 025 Puppy не рекомендуется использовать лицами с ограниченными физическими возможностями, психическими нарушениями и отсутствием опыта использования подобного прибора.
- Храните устройство вдали от прямых солнечных лучей в сухом и хорошо проветриваемом месте при температуре не ниже - 7 °С и не выше +40 °С.
- Утилизация прибора и его электрических батареек должна осуществляться в соответствии с общепринятыми правилами.

Начало использования

- Выньте щетку из упаковки.
- Крышку отсека батарейки поверните против часовой стрелки и снимите ее.
- Извлеките из отсека батарейку, снимите защитную пленку и вставьте обратно.
- Закройте крышку и поверните ее по часовой стрелке.

Выбор режима чистки

Выбор необходимого режима работы осуществляется последовательным нажатием кнопки включения.

Зубная щетка Revyline RL 025 Puppy может работать в четырех режимах:

- START** – этот режим без вибрации, он рекомендован детям, которые еще не привыкли к вибрирующему режиму. Его рекомендуется использовать для знакомства ребенка со щеткой.
- SOFT** – характеризуется низкой амплитудой колебания щетинок, невысокой частотой вибрации. Частота колебаний щетинок – 12 000 в минуту.
- NORMAL** – рекомендована для регулярного использования. Частота колебаний щетинок – 16 000 в минуту.
- INTENSIVE** – максимальная частота колебаний щетинок – 20 000 в минуту.

Любой последний выбранный режим сохраняется в памяти и при последующем использовании щетки включается в первую очередь.

Процесс чистки

- Установите насадку и смочите водой щетину с нанесенной зубной пастой.
- Расположите насадку параллельно линии десен и включите щетку.

- Перемещайте чистящую головку медленно, совершая возвратно-вращательные движения.
- Меняйте зону чистки каждые 30 секунд – по таймеру.
- По окончании чистки прополощите рот водой.

Гарантия

Гарантия на прибор – 2 года.

Гарантированное техническое обслуживание прибора осуществляется в течение действующего гарантийного срока бесплатно. Далее обслуживание щетки осуществляется за счет покупателя.

Гарантия не распространяется:

- На расходные материалы и комплектующие.
- На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие применения их не по назначению; неосторожного и/или небрежного использования (включая перегрузку), приведшего к повреждениям; модификации, вскрытия и/или ремонта неуполномоченной организацией (частным лицом); нарушения правил эксплуатации, и/или хранения, и/или транспортировки, указанных в руководстве по эксплуатации.
- На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие подключения к неправильному источнику питания.
- На товары, эксплуатировавшиеся с неустранимыми недостатками.
- На неисправности, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как действия третьих лиц, явления природы и стихийные бедствия, домашние и дикие животные, насекомые, попадание внутрь посторонних предметов и жидкостей.
- На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации и в результате естественного износа.

Комплектация

- Основной блок щетки.
- Сменная насадка – 2 шт.
- Элемент питания, тип AAA – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации.
- Гарантийный талон.

Технические характеристики

Модель: RL 025 Puppy

Предназначена для эффективной чистки зубов.

- Частота колебаний щетинок: 12 000–20 000 в мин.
- Режимы работы: 4
- Размер изделия: 160.5x35x35 мм
- Номинальное напряжение: 1,5 В
- Мощность: 0,51 Вт
- Номинальная сила тока: 0,34 А
- Уровень влагозащиты: IPX7
- Материал корпуса: ABS + Silica gel
- Материал насадки: PC + нейлон Dupont
- Питание: батарейка AAA
- Гарантия: 2 года
- Хранить при комнатной температуре.

Транспортировка, хранение и утилизация прибора

- Транспортировка изделий осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, которая предохраняет изделия от механических повреждений, попадания на них грязи и влаги.
- Хранить изделия необходимо в упаковке изготовителя в помещении с вентиляцией вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла при температуре от 0°С до +20°С.
- Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам
обращайтесь на горячую линию:

8 (800) 775-38-49

www.revyline.ru

Гарантийный талон

Название организации

Место продажи

Место для печати

Импортер: ИП Обушков М.А.,
г. Элиста, ул. Джангара, д. 7

Изготовитель: Shenzhen Fortunecome Technology Co.,Ltd
No.57 Shangxia Road, Shangxiawei, Yuanshan Street,
Longgang District, Shenzhen City, China /Китай

Сделано в Китае